


# Carry *Slim Leon*

## 先端チップ径

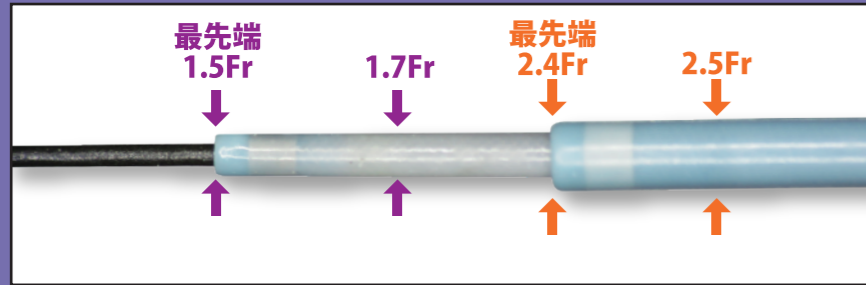

## Flow Rate

品番	造影剤一般名	ヨード含有量 (mg/mL)	粘調度 (mPa·s)	Flow Rate (mL/sec)			デッドスペース ボリューム (mL)
				4,140kPa (600psi)	5,520kPa (800psi)	6,900kPa (1,000psi)	
LS1517165	イオパミドール	300	4.4	0.2	0.3	0.5	0.33
		370	9.1	0.1	0.2	0.3	
LS2425145 DMLS2425145		300	4.4	2.5	3.2	3.8	0.70
		370	9.1	1.5	1.9	2.4	

※設定条件：造影剤 37℃加温、注入速度 5.0mL/sec、注入量 15mL、装置：ソーンマスター®SR（シーマン株式会社）  
上記、Flow Rate は、造影剤の粘調度ほか諸条件により実験値と異なる場合がありますので参考値です

※製品改良の為、記載内容の一部を予告なく変更することがあります。  
※使用前に製品の添付文書をよく読み、記載されている説明に従って使用してください。

販売名：キャリー  
一般的名称：中心循環系マイクロカテーテル  
医療機器承認番号：21600BZZ00598000  
高度管理医療機器

血管内処置診断用マイクロカテーテル

# Carry *Slim Leon*

**”Selective 1.7Fr” + ”Selective 2.5Fr” Coaxial System**

**U&M 株式会社 ユー・ティー・エム**

〒463-0037  
愛知県名古屋市守山区天子田 3 丁目 901  
TEL 052-726-8400 FAX 052-726-8401

本社 / 〒440-0858  
愛知県豊橋市つつじが丘 2 丁目 16-3  
TEL 0532-63-4326 FAX 0532-61-1134  
<http://www.utm-m.co.jp>

**U&M 株式会社 ユー・ティー・エム**


# マイクロカテーテルの細径化による「Coaxial System」の新たなメソッド

”Selective1.7Fr”+”Selective2.5Fr”の  
組み合わせにより広がる可能性

## Selective1.7Fr-1.7Fr

### ■ Characteristics

- ①先端チップ部 1.5Fr
- ②0.014inch ストレートインナー
- ③適合ガイドワイヤー 0.012inch 以下
- ④内径 0.025inch 以上のカテーテルに Coaxial 挿入が可能

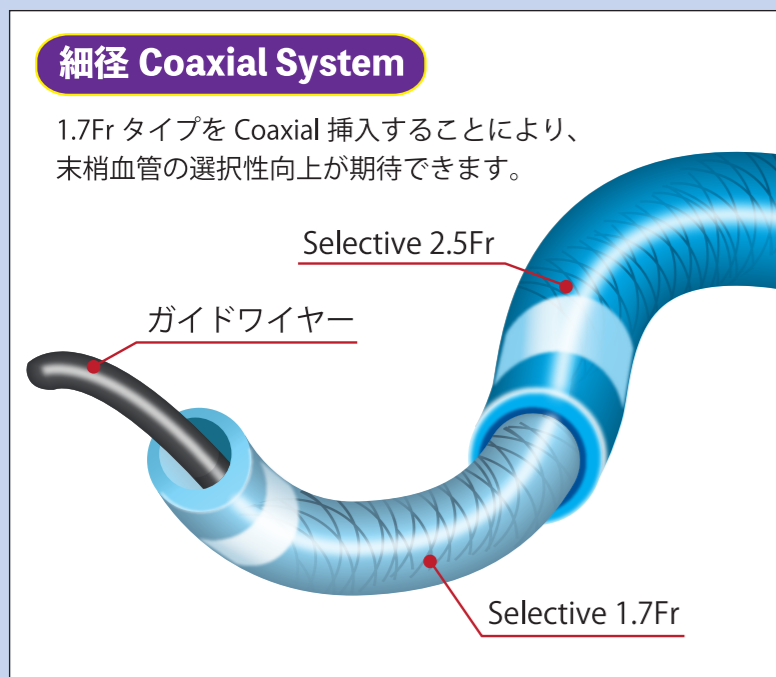

## Selective 1.5Fr/1.7Fr/1.7Fr(1marker)

品番	外径			内径	有効長	先端形状	最大適合ガイドワイヤー	適合ガイドワイヤーカテーテル最小内径	最大耐圧
	先端チップ部	先端部	手元部						
LS1517165	1.5Fr	1.7Fr	1.7Fr	0.014 inch	165cm	ストレート	0.012 inch	0.025 inch	1000 PSI


保険医療材料請求分類 マイクロカテ・OSB  
 ※先端形状はストレート以外に 45° アングルタイプをラインアップしております。  
 ※上記以外の品番(全長、形状など)付属品の有無につきましては弊社営業担当者までお問い合わせ下さい。  
 ※本製品の他社マイクロカテーテルとの適合性は検証していません。



## Selective2.5Fr-2.5Fr

### Selective : 内径 0.025inch

2.5Fr タイプは 0.025inch 内径を確保、2 マーカーもラインアップしており、塞栓材の選択肢が広がります。

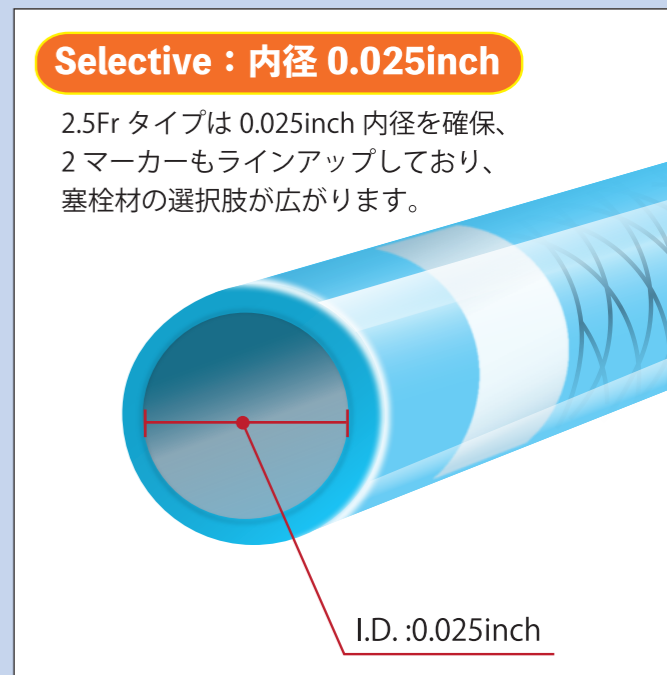

### ■ Characteristics

- ①先端チップ部 2.4Fr
- ②0.025inch ストレートインナー
- ③内径 0.035inch 以上のカテーテルに Coaxial 挿入が可能

## Selective 2.4Fr/2.5Fr/2.5Fr(1marker)

品番	外径			内径	有効長	先端形状	最大適合ガイドワイヤー	適合ガイドワイヤーカテーテル最小内径	最大耐圧
	先端チップ部	先端部	手元部						
LS2425145	2.4Fr	2.5Fr	2.5Fr	0.025 inch	145cm	ストレート	0.021 inch	0.035 inch	1000 PSI

保険医療材料請求分類 マイクロカテ・OSB

## Selective 2.4Fr/2.5Fr/2.5Fr(2marker)

品番	外径			内径	有効長	先端形状	最大適合ガイドワイヤー	適合ガイドワイヤーカテーテル最小内径	最大耐圧
	先端チップ部	先端部	手元部						
DMLS2425145	2.4Fr	2.5Fr	2.5Fr	0.025 inch	145cm	ストレート	0.021 inch	0.035 inch	1000 PSI

保険医療材料請求分類 マイクロカテ・O コイル  
 ※先端形状はストレート以外に 45° アングルタイプをラインアップしております。  
 ※上記以外の品番(全長、形状など)付属品の有無につきましては弊社営業担当者までお問い合わせ下さい。  
 ※本製品の他社マイクロカテーテルとの適合性は検証していません。